

Warranty

1. Počas záručnej lehoty bude naša spoločnosť zodpovedná za poskytovanie servisných služieb v prípade akejkoľvek poruchy spôsobenej problémami s kvalitou výrobku, ku ktorej došlo za bežných podmienok používania. Zákazníci môžu priniesť záručný list a zariadenie k predajcovi, aby im boli poskytnuté servisné služby.

Náklady na dopravu a balenie budú hradené zákazníkmi.

2. Servisné služby sa neposkytujú v nasledujúcich prípadoch:

0 Bez záručného listu.

Porucha alebo poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou, ktorá nie je v súlade s pokynmi v návode.

0 Poškodenie spôsobené demontážou vykonanou neautorizovaným servisným technikom autorizovaného servisného technika.

0 Porucha alebo poškodenie spôsobené presunom, pádom alebo prepravou.

0 Poškodenie alebo porucha spôsobená nesprávnym skladovaním údržby alebo používania.

0 Z ľahko poškoditeľných dielov a bezplatného príslušenstva sa vylučujú.


0 Porucha alebo poškodenie spôsobené vyššou mocou.

3. Záručný list nie je možné nahradiť, preto si ho prosím starostlivo uchovajte.

Údaje o zákazníkovi	Celé meno:
	Adresa:
	Telefón:
	Dátum nákupu:
	Poznámky:
Platnosť: do 1 roka od dátumu zakúpenia zariadenia. Počas záručnej doby nie sú všetky servisné služby bezplatné, preto si prosím prečítajte „Zásady údržby”. Po uplynutí záručnej lehoty sa v prípade potreby údržby obráťte na predajcu.	

Vrtačka na nechty

Návod na použitie a záručný list

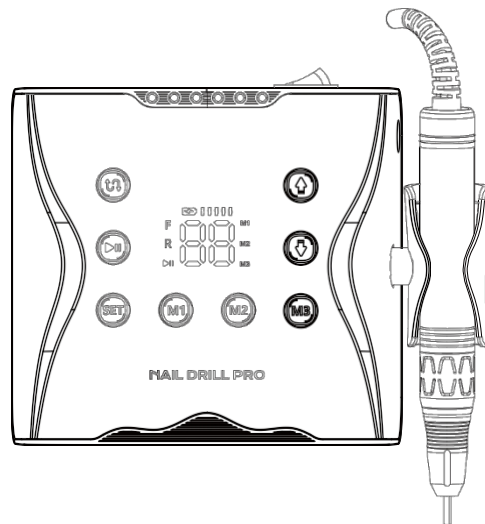

JMD-S226

NAIL DRILL SYSTEM

0 Zapnutie/Vypnutie pre násadec 0 Otvor pre adaptér 0 Otvor

0 Dopredu/Späť 0 Pauza 0 Nastavenie rýchlosti (tlačidlo SET) 0 Nastavenie 1 (tlačidlo M1)

E Stlačte tlačidlo dopredu/dozadu → Nastavte požadovanú rýchlosť

→ Stlačte tlačidlo SET → Stlačte tlačidlo M1 na potvrdenie

0 Nastavenie 2 (tlačidlo M2)

E Stlačte tlačidlo „Vpred/Späť“ → Nastavte si požadovanú rýchlosť

→ Stlačte tlačidlo SET → Stlačte tlačidlo M2 na potvrdenie

0 Nastavenie 3 (tlačidlo M3)


B Stlačte tlačidlo dopredu/dozadu → Nastavte požadovanú rýchlosť

→ Stlačte tlačidlo SET → Stlačte tlačidlo M3 na potvrdenie

0 Logo OEPI 0 Rukoväť 0 Držiak násadca

0 Zníženie rýchlosti 0 Zvýšenie rýchlosti

0 Držiak vrtákov na nechty 0 Zobrazenie rýchlosti 0 Stav batérie

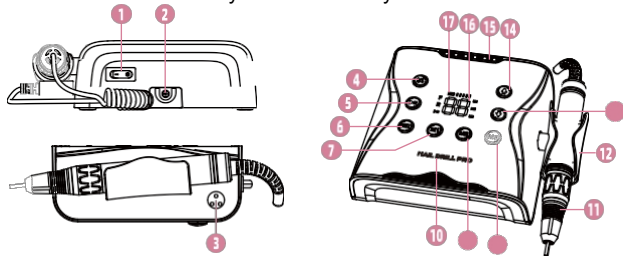

SPECIFICATION

1. Model: MD-S226

2. Príkon: 60 W

3. Vstup: AC 100–240 V, 50/60 Hz

4.0 Výstup: DC 3–24 V

5. Hmotnosť: 1,2 kg 6. Rozmery:

230 × 220 × 65 mm


7. 5 rýchlostí: 0–35 000 ot/min

PACKING LIST

1*Hlavné zariadenie
1*Vrtáky na nechty
1*adaptér alebo
1*kábel

Návod na použitie
1*Držiak ručnej hlavice


SET DRILL BITS

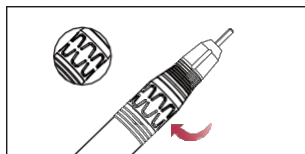

@ Otočte ľavú stranu v smere hodinových ručičiek, kým nezačujete cvaknutie, ktoré signalizuje, že sa vŕtacia na miesto



@ Vyberte pôvodný vrták

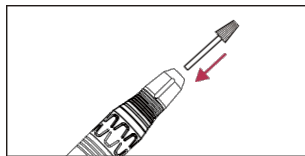

0 Vložte vrták veľkosti 3/32"



@ Otočte pravú stranu proti smeru hodinových ručičiek, aby sa vrták pevne zaistil

PRECAUTION

J. NEROZOBRAJTE ručnú hlavicu:

2. Nenechajte ručnú hlavicu spadnúť.

3. Nepracujte vo vlhkom prostredí. 4. Vlhkosť prevádzkového prostredia: 3096–7596. 5. Teplota prevádzkového prostredia: +J 0 °C–20 °C.

6. Pri výmene bitov vypnite napájanie.

7. Pred zapojením napájacieho kábla sa uistite, že je vypínač vypnutý, aby ste predišli neočakávanému zraneniu v dôsledku náhleho spustenia.

OPERATION STEPS

1. Po stlačení tlačidla „ “, rozsvieti sa striedavé svetlo a zariadenie prejde do pohotovostného režimu.

2. Keď stlačíte tlačidlo „ “ a „ “, rýchlosť sa prispôsobí V rozsahu 00–35 (RPM*1000) a 35–00 (RPM*1000) môžete nastaviť požadovanú rýchlosť. K dispozícii sú tiež 3 nastavenia rýchlosti, z ktorých si môžete vybrať podľa vlastných preferencií.

3. Po stlačení tlačidla „ “, môžete nastaviť chod násadky dopredu alebo dozadu.

4. Keď stlačíte tlačidlo „ “, ručná hlavica prejde do režimu pauzy. Opätovným stlačením tlačidla pauzy režim pauzy zrušíte.

5. Keď stlačíte tlačidlo nastavenia, začne blikáť, čo znamená, že ste prešli do režimu nastavenia. Môžete nastaviť požadovanú rýchlosť, smer otáčania dopredu alebo dozadu podľa svojich zvyklostí; k dispozícii sú celkom 3 pamäťové režimy pre uloženie nastavení.